

# Saliva Self-Collection Kit Instructions

## IMPORTANT REMINDERS:

- Test must be registered online.
- You must follow observed collection instructions for specimen to be valid.
- Do not eat, drink, smoke or chew gum within 30 minutes of the collection.
- Specimens must be shipped same day you collect (Monday-Friday)



Before performing collection, confirm the nearest UPS drop off location and hours of operation. Ship the sample on the same day as collection before the last pick up or your sample may not be processed by the laboratory.




You must register your kit at [testinabag.com](http://testinabag.com) before you collect. Do not register before you are ready to collect as you will be asked to document the date and time of collection. Scan the QR code on the enclosed label to be taken directly to the registration page.




When ready to begin the collection, call 844-512-1385. Our representatives will walk you through the observed collection process. Your collection must be observed in order to be processed.

## User Instructions **YOUR COLLECTION MUST BE OBSERVED. DO NOT BEGIN UNTIL PROMPTED BY REPRESENTATIVE @ 844-512-1385**


Most people take between 2 and 5 minutes to deliver a sample following steps 1 to 5.

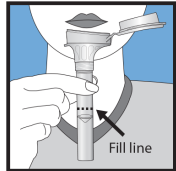


- 1 Spitting into funnel until the amount of liquid (not bubbles) reaches the fill line shown in picture #1.

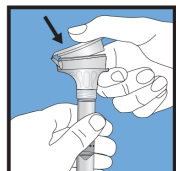


- 2 Hold the tube upright with one hand. Close the funnel lid with the other hand by pushing the lid until you hear a loud click. The liquid in the lid will be released into the tube to mix with the sample. Make sure that the lid is closed tightly.

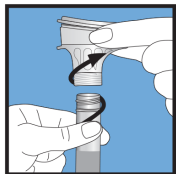

- 3 Hold the tube upright. Unscrew the funnel from the tube.

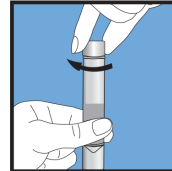

- 4 Use the small cap to close the tube tightly.

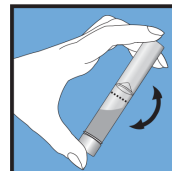

- 5 Shake the capped tube for 10 seconds. Discard or recycle the funnel.



Remove QR code sticker from enclosed label and place around sealed tube.



Place the collection tube in the biohazard bag. Seal the biohazard bag by closing the zip lock seal. Place biohazard bag in return shipping bag and seal shut.



Immediately deliver package to a UPS drop box using the prepaid, pre-addressed return package. Ship the sample on the same day as collection before the last pick up or your sample may not be processed by the laboratory.

# Instrucciones del kit de recolección automática de saliva

## RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- La prueba debe registrarse en línea.
- Debe seguir las instrucciones de recolección observadas para que la muestra sea válida.
- No coma, beba, fume ni mastique chicle dentro de los 30 minutos posteriores a la recolección.
- Las muestras deben enviarse el mismo día que las recolecta (de lunes a viernes)



Antes de realizar la recolección, confirme el lugar de entrega de UPS más cercano y el horario de atención. Envíe la muestra el mismo día de la recolección antes de la última recolección o es posible que el laboratorio no procese la muestra.



Debe registrar su kit en testinabag.com antes de recogerlo. No se registre antes de estar listo para recolectar, ya que se le pedirá que documente la fecha y hora de recolección. Escanee el código QR en la etiqueta adjunta para ir directamente a la página de registro.




Cuando esté listo para comenzar la recolección, llame al 844-512-1385. Nuestros representantes lo guiarán a través del proceso de recolección observado. Su colección debe ser observada para poder ser procesada.


## Instrucciones para el usuario

**SU COLECCIÓN DEBE SER OBSERVADA. NO COMIENCE HASTA QUE LO INDIQUE EL REPRESENTANTE @ 844-512-1385**


La mayoría de las personas tardan entre 2 y 5 minutos en entregar una muestra siguiendo los pasos 1 a 5.

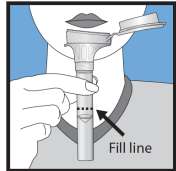


- 1 Escupir en el embudo hasta que la cantidad de líquido (no burbujas) alcance la línea de llenado que se muestra en la imagen #1.

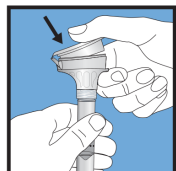


- 2 Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa del embudo con la otra mano presionando firmemente la tapa hasta que escuche un fuerte clic. El líquido de la tapa se liberará en el tubo para mezclarse con la muestra. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

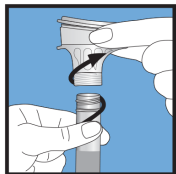

- 3 Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

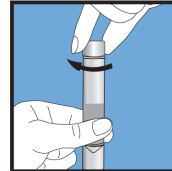

- 4 Use la tapa pequeña para cerrar el tubo herméticamente.

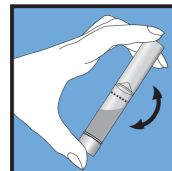

- 5 Agite el tubo tapado durante 10 segundos. Deseche o recicle el embudo.



Retire la etiqueta del código QR de la etiqueta adjunta y colóquela alrededor del tubo sellado.



Coloque el tubo de recolección en el bolsa de riesgo biológico. Selle la bolsa de riesgo biológico cerrando el cierre con cremallera. Sitio bolsa de riesgo biológico en la bolsa de envío de devolución y sellar bien.



Entregue el paquete de inmediato en un buzón de entrega de UPS utilizando el paquete de devolución prepago y con la dirección previa. Envíe la muestra el mismo día de la recolección antes de la última recolección o es posible que el laboratorio no procese la muestra.